



STUDEX EUROPA GmbH • 90542 Eckental • Tel.: 09126 2563-0 • Fax: 09126 2563-50 • E-Mail: studex-sales@studexeuropa.de

So funktioniert's – sicher – hygienisch

1




Reinigen Sie die Ohrhäppchen von beiden Seiten gründlich mit dem Alkoholtupfer. Lassen Sie den Alkoholreiniger 30 Sekunden einwirken und trocknen.

2



Markieren Sie mit dem Studex-Markierstift die Stelle, an welcher das Ohr durchstochen werden soll.

3

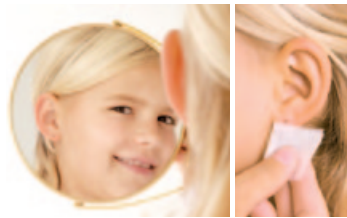

Lassen Sie Ihren Kunden die markierte Stelle im Spiegel betrachten und zustimmen. Wischen Sie die Farbe vorsichtig ab, damit nur noch ein leicht sichtbarer Punkt die gewünschte Stelle markiert.

4



Trennen Sie die beiden Blisterverpackungen an der vorgesehenen Perforation ab. Entfernen Sie das Siegpapier der Blisterverpackung – entnehmen Sie die Kartusche jedoch nicht.

5



Halten Sie die Kartusche mit der Blisteröffnung nach unten und drücken Sie die Kartusche in die Halterung des Instruments. Achten Sie darauf, dass der Teil mit der Pousette zuerst einrastet.

6



Danach drücken Sie den hinteren Teil der Kartusche in die Halterung des Instruments und nehmen die Blisterverpackung ab – werfen Sie diese jedoch nicht weg, sie wird im Punkt 11 wieder verwendet.

7



Positionierung: Richten Sie die Ohrsteckerspitze auf die markierte Stelle und drücken die das Instrument leicht zu, um die Ohrsteckerspitze präzise auf der markierten Stelle zu positionieren.

8



Stechvorgang: Wenn Sie mit der Positionierung zufrieden sind, drücken Sie das Instrument bis zum Anschlag durch. Die Pousette wird automatisch auf dem Stecker positioniert. Wichtig: Instrument bis zum Anschlag zudrücken.

9



Lösen Sie den Druck vom Instrument, es kehrt in seine Ausgangsposition zurück, und ziehen Sie es vorsichtig senkrecht nach unten ab.

10



Setzen Sie die Blisterverpackung wieder auf die Kartusche. Indem Sie die Kartusche mit der Blisterverpackung nach vorne drücken, können Sie die Kartusche aus der Halterung des Instruments lösen.

11



Entnehmen Sie die Kartusche mit der Blisterverpackung aus der Halterung des Instruments und werfen Sie beides weg.

12



Empfehlen Sie Ihrem Kunden, das Ohrloch 24 Stunden nach dem Stechen 2 x täglich mit der Studex After Piercing Lotion zu pflegen und beraten Sie Ihren Kunden über die Nachpflege innerhalb der ersten 6 Wochen.